V44: Röntgenreflektrometrie

Martin Schönfeld martin.schoenfeld@udo.edu Tim Sedlaczek tim.sedlaczek@udo.edu

Durchführung: 07.11.2022 Abgabe: 11.11.2022

TU Dortmund – Fakultät Physik

1 Zielsetzung

Das Ziel dieses Versuchs ist es, ein Verständnis für die Röntgenreflektrometrie zu entwickeln. Dazu wird die Dispersion, Rauigkeit und Schichtdicke eines Siliziumwafers bestimmt.

2 Theorie

Wenn eine elektromagnetische Welle von einem Medium mit Brechungsindex n_1 in ein anderes Medium mit Brechungsindex n_2 eintritt, findet Brechung statt. Hierbei muss gelten, dass $n_1 \neq n_2$ ist. Betrachtet wird in diesem Versuch Röntgenstrahlung mit einer Wellenlänge λ im Bereich 0,1 Å - 10 Å. Der Brechungsindex ist definiert durch

$$n = 1 - \delta + i\beta,$$

mit δ als Korrekturterm (im Bereich $\delta \approx 10^{-6}$) und β als Absorption. Das Besondere an Röntgenstrahlung ist, dass für den Brechungsindex gilt, dass er kleiner als eins ist. Das Snelliussche Brechungsgesetz ergibt sich zu

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{\cos\left(\alpha_2\right)}{\cos\left(\alpha_1\right)}.$$

Damit und mit der Annahme, dass die Grenzfläche der Medien eine homogene Ebene ist, ergibt sich der kritischer Winkel $\alpha_{\rm C}$, bei welchem eine Totalreflexion auftritt. Für kleine Winkel lässt sich

$$\alpha_{\rm C} \approx \sqrt{2\delta} = \lambda \sqrt{\frac{r_{\rm e} \rho}{\pi}}$$

nähern, wobei $r_{\rm e}$ der klassische Elektronen
radius ist und ρ bezeichnet die Elektronendichte des betrachte
ten Materials.

2.1 Fresnelsche Formeln

Die Polarisation elektromagnetischer Wellen muss bei Betrachtung von Reflexion und Transmission berücksichtigt werden. Umgesetzt wird dies durch die Fresnelschen Formeln. Wenn das Licht s-polarisiert ist, ergeben sich die Koeffizienten zu

$$\begin{split} r &= \frac{n_1 \cos \left(\alpha_1\right) - n_2 \cos \left(\alpha_2\right)}{n_1 \cos \left(\alpha_1\right) + n_2 \cos \left(\alpha_2\right)}, \\ t &= \frac{2n_1}{n_1 \cos \left(\alpha_1\right) + n_2 \cos \left(\alpha_2\right)}. \end{split}$$

Da $n_1\approx n_2$ gilt, ist hier eine Unterscheidung zwischen p- und s-Polarisation nicht notwendig. Für Röntgenstrahlung ist die Fresnelreflektivität bei $\alpha_i>3\alpha_{\rm C}$ nährungsweise gegeben als

$$R_{\rm F} = |r^2| = \left(\frac{a_{\rm C}}{2\alpha_i}\right)^4.$$

2.2 Mehrschichtsysteme

Im Folgenden werden Mehrschichtsysteme erklärt, da hier ein Polystyrolfilm auf einem Siliziumsubstrat betrachtet wird. Ein Beispiel für die Reflektivität eines solchen Systems ist in Abbildung 1 zu sehen.

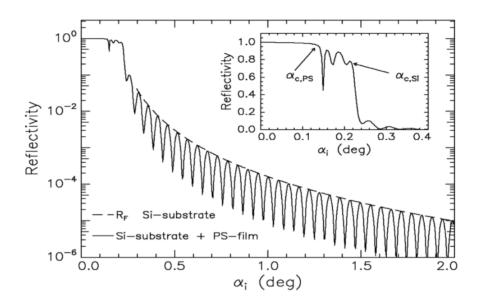


Abbildung 1: Die Reflektivität eines Mehrschichtsystems beispielhaft gegen den Einfallswinkel α_i aufgetragen.[Tol05]

In dem vergrößerten Ausschnitt sind zwei Totalreflexionen zu erkennen, welche zum einen vom Siliziumsubstrat und zum anderen vom Polystyrolfilm stammen. Oszillationen beim Abfall der Reflektivität treten auf wegen Interferenzeffekten an der Oberfläche. Hierdurch sind Rückschlüsse auf den Schichtabstand möglich. Bei einer destruktiven Intereferenz muss ein Gangunterschied von einem ungeraden Vielfachen von $\frac{\lambda}{2}$ vorliegen. Es folgt

$$d = \frac{2\pi}{\delta q_z} = \frac{\lambda}{2\delta\alpha_1},$$

hierbei gilt $\vec{q}=\vec{k_2}-\vec{k_1}$ und $q_2=2k\sin{(\alpha_1)}.$

Bei N+1 Schichten im betrachteten System kann die Reflektivität berechnet werden mir dem rekursiven Parratt-Algorithmus. Abbildung 2 zeigt ein solches System.

Die unterste Schicht ist beim Parratt-Algorithmus unendlich dick, wodurch dort keine Transmission stattfinden kann. Die mathematische Beschreibung des Algorithmus ist

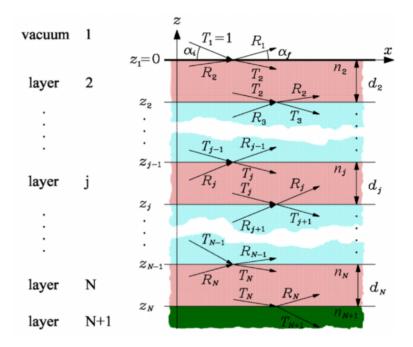


Abbildung 2: Eine Darstellung eines Mehrschichtsystems mit N+1 Schichten.[Pyn]

$$X_{j} = \frac{R_{j}}{T_{j}} = \exp\left(-2ik_{z,j}z_{j}\right) \cdot \frac{r_{j,j+1} + X_{j+1}\exp\left(2ik_{z,j+1}z_{j}\right)}{1 + r_{j,j+1}X_{j+1}\exp\left(2ik_{z,j+1}z_{j}\right)}.$$

 $r_{j,j+1}$ beschreibt die Fresnelreflektivität an der j-ten Grenzfläche. Die Startbedingung ist, dass an der untersten Schicht keine Reflextion stattfindet $R_{N+1}=0$. Somit kann jeweils das Verhältnis des reflektierten und transmittierten Anteils rekursiv von unten nach oben berechnet werden.

2.3 Rauigkeit

Die Oberfläche der Grenzfläche ist nicht perfekt glatt, was in der Berechnung der Reflektivität berücksichtigt werden muss. Dafür werden die Fresnelkoeffizienten modifiziert zu

$$\begin{split} \tilde{r}_{j,j+1} &= r_{j,j+1} \exp\left(-2k_{z,j}k_{z,j+1}\sigma_j^2\right), \\ \tilde{t}_{j,j+1} &= t_{j,j+1} \exp\left(\left(k_{z,j-k_{z,j+1}}\right)^2 \cdot \frac{\sigma_j^2}{2}\right). \end{split}$$

2.4 Geometriefaktor und Geometriewinkel

Abbildung 3 zeigt, dass der verwendete Strahl eine größere Fläche überstreicht als die Probenoberfläche.

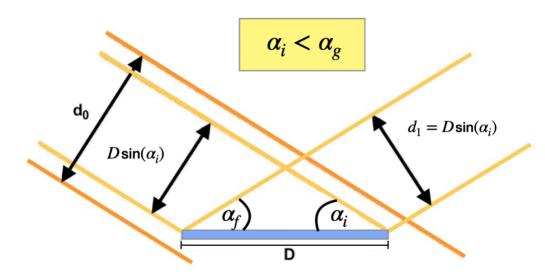


Abbildung 3: Eine beispielhafte Veranschaulichung des Geometriewinkels. [Dor]

Daher kann nur ein Teil der Intensität I reflektiert und im Anschluss detektiert werden. Berücksichtigt wird dies durch den Geometriefaktor G:

$$G = \frac{D\sin(\alpha_i)}{d_0} \qquad \text{mit} \qquad \alpha_i < \alpha_g, \qquad (1)$$

$$G = 1 \qquad \text{mit} \qquad \alpha_i > \alpha_g. \qquad (2)$$

Hierbei ist $D\sin{(\alpha_i)}$ die Strahlbreite, welche die Probenoberfläche trifft. d_0 ist die gesamte Breite des Strahls.

3 Versuchsaufbau

Durchgeführt wird der Versuch mit einem D8-Diffraktometer. Ein D8-Diffraktometer besteht unter Anderem aus einer Röntgenröhre mit Kupferanode. Diese wird mit einer Spannung von $40\,\mathrm{kV}$ und einer Stromstärke von $40\,\mathrm{mA}$ betrieben. Die dabei entstehende Strahlung trifft auf einen Göbelspiegel, welcher die Strahlung bündelt und monochromatisiert. Dies dient dazu, dass das nicht-polarisierte Licht, dass sich kugelförmig ausbreitet in eine detektierbare Richtung abgelenkt wird. Der daraus resultierende Strahl besitzt eine Wellenlänge von $\lambda = 1,54\,\mathrm{\mathring{A}}$.

4 Durchführung

Vor der eigentlichen Messung muss der Aufbau zunächst justiert werden.

4.1 Justage

Die Justage des Aufbaus erfolgt in sechs Schritten. Als erstes wird ein Detektorscan durchgeführt, wofür die Probe nicht im Strahlgang liegt. Der Detektor und die Röntgenröhre werden auf die Position 0° gefahren. Deren Lage wird nun variiert, um die tatsächliche Nulllage des Detektors zu finden. Dies wird getan, bis die Intensität des Primärstrahls das Maximum durchläuft. Genau diese Position ist die normierte Nullposition. Darauf folgt der erste Z-Scan. Hier wird die Probenjustage angepasst. Die Probe wird in den Strahlengang gebracht und die Intensität I wird für verschiedene z-Positionen gemessen. Die Position der Probe wird variiert, bis I auf den Wert $I=\frac{1}{2}I_{\max}$ sinkt. Nun misst man den ersten Rockingscan. Der Detektor und die Röntgenröhre werden um die Probe bewegt. Es wird ein konstanter Winkel $2\theta = 0^{\circ}$ beibehalten zwischen der Probe und dem Detektor. Das Maximum aus dem resultierenden Intensitätsverlauf wird abgelesen und für die weiteren Schritte verwendet. Darauf folgt der zweite Z-Scan. Weil die Position der Probe sich durch den Rockingscan verändert hat, wird ein erneuter Z-Scan durchgeführt. Hiernach wird ein zweiter Rockingscan durchgeführt für eine Erhöhung der Präzession. Es wird erneut das Maximum abgelesen während die Motoren entsprechend ausgerichtet werden. Als letztes wird ein dritter Rockingscan durchgeführt, bei dem mit genauerer Kalibration das Maximum vermessen wird.

4.2 Messung

Nach der Justage wird ein Reflektivitätsscan durchgeführt. Der Einfallswinkel α_i und der Winkel zwischen Probe und Detektor $\alpha_{\rm f}$ sind hier gleich. Es wird ein Scanbereich von 0° bis 2,5° und eine Schrittweite von 0,005° gewählt. Die Messzeit beträgt 40 min. Zusätzlich wird ein diffuser Scan durchgeführt. Hier wird der Anteil der gestreuten Intensität an der Reflektivität bestimmt.

Literatur

- [Dor] TU Dortmund. Versuchsanleitung zu Versuch 44. URL: https://moodle.tu-dortmund.de/pluginfile.php/2104402/mod_resource/content/6/V44.pdf (besucht am 08.11.2022).
- [Pyn] R. Pynn. "Neutron Reflectometry". In: (), S. 14. URL: https://www.eng.uc.edu/~beaucag/Classes/Characterization/ReflectivityLab/RogerPynnReflectometry.pdf (besucht am 08.11.2022).
- [Tol05] M. Tolan. "X-ray reflectivity and Grazing Incidence Small Angle X-Ray Scattering". In: (2005), S. 17. URL: https://magnetism.eu/esm/2005-constanta/slides/renaud-slides.pdf (besucht am 08.11.2022).